

Prior to use, carefully read the instructions for use.

EN

GC Dry Mouth Gel

TO PROVIDE EXTRA COMFORT FOR DRY MOUTH SUFFERERS

GC Dry Mouth Gel is designed to provide comfort for person suffering from Dry Mouth. It is recommended to be used for people who may experience difficulties in eating, speaking or are suffering from discomfort due to dry mouth. GC Dry Mouth Gel is sugar free.

RECOMMENDED INDICATIONS

- To provide comfort and relief for dry mouth conditions.
- To provide a protective coating for teeth and oral tissue.
- To help control bad breath.

CONTRAINDICATIONS

Avoid use of this product in patients with known allergies to hydroxybenzoates.

DIRECTIONS FOR USE

- Use GC Dry Mouth Gel as often as required when the mouth feels dry. This can be anytime during the day or at night time.
- Extrude a sufficient amount of gel from the tube on the finger or use a cotton swab to take the gel from the tube. Apply the gel to tongue, oral mucosa and or teeth.

FLAVOUR

Fruit Salad (F)*, Raspberry (R), Orange (O), Lemon (L), Mint (M)
*Not available in Europe.

F, R, O, L and M in parentheses are abbreviations for each flavour.

These abbreviations are marked on the tubes after lot numbers to show the flavour of the contents.

For example, 060815MMint

STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a cool dark low humidity area away from direct sunlight (8-25°C)(46.4-77.0°F).

PACKAGE

A tube contains 40g (35mL).

- 10 tube pack (2 each of 5 flavours)
- 10 tube pack (4-Flavour pack)
- 10 tube pack (Raspberry flavour)

Note:
All packaging types may not be available in all countries.


CAUTION

- Avoid contact with eyes. In case of contact, flush immediately with plenty of water and seek medical attention.
- Always replace the cap after use and remove any residual paste or moisture around the tube neck or inside the cap.
- If spilled onto clothing, wash with water.
- Anyone who is taking prescription medications should consult a doctor before using this product.
- GC Dry Mouth Gel can be used in combination with GC Tooth Mousse / GC MI Paste or GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus but should not be used with other products.
- In rare cases, the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
http://www.gceurope.com
or for The Americas
http://www.gcamerica.com
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.
DO NOT IMMERGE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Last revised : 09/2018

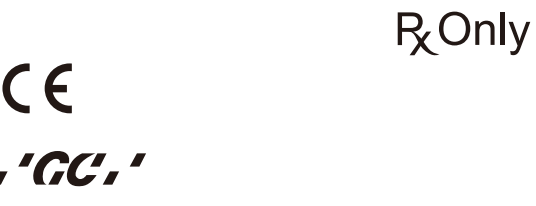

MANUFACTURED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan
RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

DISTRIBUTED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan
EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium
TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.

3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1 708-597-0900

GC SOUTH AMERICA
Rua Heliadora, 399, Santana - São Paulo, SP, BRASIL
CEP: 02022-051 - TEL: +55-11-2925-0965
CNPJ: 08.279.999/0001-61

RESP. TEC: Mayara de Santos Ribeiro - CRO/SP 105.982

EN

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen!

DE

GC Dry Mouth Gel

LINDERUNG BEI MUNDTROCKENHEIT

GC Dry Mouth Gel wurde entwickelt, um Menschen mit trockenem Mund zu helfen. GC Dry Mouth Gel wird empfohlen, wenn durch Mundtrockenheit Probleme beim Essen und Sprechen entstehen und verbessert das Mundgefühl im allgemeinen. GC Dry Mouth Gel ist zuckerfrei.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

- Lindern von Mundtrockenheit.
- Zähne und Mundgewebe mit einer Schutzschicht versehen.
- Unterstützung bei schlechtem Atem.

GEGENANZEIGEN

Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produktes bei Patienten mit bekannter Hydroxybenzoat-Allergie.

ANWENDUNG

- GC Dry Mouth Gel kann beliebig oft angewendet werden, sobald sich der Mund trocken anfühlt. Die Anwendung kann jederzeit tagsüber oder in der Nacht erfolgen.
- Eine entsprechende Menge Gel auf den Finger oder auf einen Tupfer geben und auf Zunge, Zähne und Mundgewebe auftragen.

GESCHMACKSRICHTUNGEN

Fruchtsalat (F)*, Himbeere (R), Orange (O), Limone (L), Minze (M)
*Nicht in Europa verfügbar.

F, R, O, L und M stehen als Kennzeichen für den jeweiligen Geschmack. Die Kennzeichnungen sind auf der Tube bei der LOT-Nummer angebracht, um den jeweiligen Geschmack anzuzeigen.
Beispiel: *060815M"Minze

AUFBEWAHRUNG

Für eine optimale Leistung, An einem kühlen, trockenen Ort ohne Einwirkung von Sonnenlicht lagern (8-25°C).

PACKUNGSGRÖßEN

Tubeninhalt: 40g (35mL).

- 10 Tuben (2 x je Geschmacksrichtung)
- 10 Tuben (Packung mit 4 Geschmacksrichtungen)
- 10 Tuben (Himbeere Geschmacksrichtung)

Anm.:
Nicht alle Packungseinheiten sind in jedem Land erhältlich.

VORSICHT

- Augenkontakt vermeiden. Bei einem Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
- Die Tube nach Gebrauch sofort wieder verschließen und Gelrückstände an der Tube oder in der Kappe entfernen.
- Verunreinigungen auf Textilien mit Wasser ausspülen.
- Bei Anwendung verschreibungspflichtiger Medikamente sollte vor einer Anwendung von GC Dry Mouth Gel der verschreibende Arzt konsultiert werden.
- GC Dry Mouth Gel kann zusammen mit GC Tooth Mousse / GC MI Paste oder GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus verwendet werden; es sollte nicht zusammen mit anderen Produkten verwendet werden.
- In seltenen Fällen können Empfindlichkeitsreaktionen bei der Anwendung auftreten. In einem solchen Fall sofort die Anwendung abbrechen und einen Arzt konsultieren.
- Stets Schutzkleidung (PSA) wie Handschuhe, Mundschutz und Schutzbrille tragen.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:
http://www.gceurope.com
In Amerika gilt folgender Link:
http://www.gcamerica.com

Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

REINIGUNG UND DESINFEKTION
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.
NIEMALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Desinfizieren Sie mit einem für Ihr Land zugelassenen und registrierten (mid-level registered) Desinfektionsmittel.

Zuletzt aktualisiert : 09/2018

GC Dry Mouth Gel

POUR APPORTER DU CONFORT EN CAS DE SECHERESSE BUCCALE

GC Dry Mouth Gel est conçu pour apporter du confort aux personnes souffrant de xérostomie. Il est recommandé pour les personnes qui peuvent éprouver des difficultés à manger, à parler ou qui souffrent de l'inconfort dû à la sécheresse de la bouche. GC Dry Mouth Gel est sans sucre.

INDICATIONS

- Pour apporter aide et confort aux bouches sèches.
- Pour apporter une couche protectrice aux dents et aux tissus buccaux.
- Pour aider à contrôler l'halitose.

CONTRE INDICATIONS

Éviter l'utilisation de ce produit chez les patients présentant des allergies connues aux hydroxybenzoates.

MODE D'EMPLOI

1. Utiliser GC Dry Mouth Gel aussi souvent que nécessaire lorsque la bouche paraît sèche. Et cela à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit.
2. Extraire du tube une quantité suffisante de gel directement sur le doigt ou sur un coton tige. Appliquer le gel sur la langue, la muqueuse buccale et/ou les dents.

PARFUMS

Salade de fruits (F)*, Framboise (R-raspberry), Orange (O), Citron (L), Menthe (M)

*Non disponible en Europe.

F, R, O, L et M entre parenthèse correspondent aux parfums des tubes. Ces abréviations sont marquées sur les tubes après les numéros de lot pour indiquer le parfum.
Exemple, 060815MMenthe

CONSERVATION

Pour des performances optimales, conserver dans endroit frais et sombre, peu humide et à l'abri des rayons direct du soleil (8-25°C)(46.4-77.0°F).

CONDITIONNEMENT

Tube de 40g (35mL).

- Pack de 10 tubes (2 parfums de chaque)
- Pack de 10 tubes (Emballage avec 4 arômes)
- Pack de 10 tubes (Framboise parfum)

Note :
Tous les conditionnements ne sont pas disponibles dans tous les pays.

ATTENTION

- Éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer immédiatement avec de l'eau et demander un avis médical.
- Toujours replacer le capuchon après utilisation et retirer les résidus de pâte ou d'humidité autour du tube ou dans le capuchon.
- En cas de projection sur les vêtements, laver à l'eau.
- Toute personne qui suit un traitement médical doit consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.
- GC Dry Mouth Gel peut être utilisé en combinaison avec GC Tooth Mousse / GC MI Paste ou GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus mais ne doit pas être utilisé avec d'autres produits.
- Dans de rares cas, ce produit peut entraîner des sensibilités. Si tel est le cas, cessez toute utilisation du produit et consultez un médecin.
- Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur:

http://www.gceurope.com
ou pour l'Amérique
http://www.gcamerica.com
Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

NETTOYAGE ET DESINFECTIION
Systèmes de distribution multi-usage: pour éviter toute contamination croisée entre les patients, ce dispositif nécessite une désinfection de niveau intermédiaire. Immédiatement après utilisation, inspecter le dispositif et l'étiquette. Jeter le dispositif s'il est endommagé.
NE PAS IMMERMER. Nettoyer soigneusement le dispositif pour prévenir l'assèchement et l'accumulation de contaminants. Désinfecter avec un produit de contrôle de l'infection de niveau intermédiaire selon les directives régionales / nationales.

Dernière mise à jour : 09/2018

GC Dry Mouth Gel

DONA MAGGIOR CONFORT ALLE PERSONE AFFETTE DA SECCHENZA DELLE FAUCI

GC Dry Mouth Gel è stato sviluppato per donare maggior confort alle persone che soffrono di secchezza delle fauci. Il suo uso è raccomandato per persone che possono incontrare difficoltà a mangiare, parlare o provano disagio a causa della secchezza delle fauci. GC Dry Mouth Gel è privo di zucchero.

INDICAZIONI RACCOMANDATE

- Per dare confort e sollievo a persone che soffrono di secchezza delle fauci.
- Per fornire un rivestimento protettivo ai denti e al tessuto orale.
- Per aiutare a ridurre l'altisi.

CONTROINDICAZIONI

Evitare l'utilizzo di questo prodotto in pazienti con allergie note all'idrossibenzoato.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Usare GC Dry Mouth Gel ogni volta che è necessario, quando insorge la sensazione di secchezza delle fauci, sia durante il giorno che di notte.
- Estrarre dal tubetto una quantità sufficiente di gel ponendola su un dito o su un dischetto di cotone. Applicare il gel sulla lingua, sulla mucosa orale e/o sui denti.

GUSTI

Fruit Salad (F, macedonia)*, Raspberry (R, lampone), Orange (O, arancia), Lemon (L, limone), Mint (M, menta)
*Non disponibile in Europa.

Le lettere F, R, O, L ed M tra parentesi sono le abbreviazioni di ciascun gusto. Queste abbreviazioni sono riportate sui tubetti dopo il numero di lotto e indicano il gusto del prodotto contenuto.
Ad esempio, 060815MMint

CONSERVAZIONE

Per ottenere il massimo rendimento del prodotto, conservare in luogo fresco, buio e poco umido, lontano dalla luce solare diretta (8-25°C)(46.4-77,0°F).

CONFEZIONI

Un tubetto contiene 40g (35mL).

- Confezione da 10 tubetti (2 per ciascuno dei 5 gusti)
- Confezione da 10 tubetti (Confezione da 4 aromi)
- Confezione da 10 tubetti (Lampone gusto)

Nota:
Non tutti i confezionamenti sono disponibili in tutti i paesi.

AVVERTENZE

- Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.
- Richiedere sempre il tubetto dopo l'uso ed eliminare l'eventuale pasta residua o l'umidità formatasi intorno al foro del tubetto o all'interno del tappo.
- Se il prodotto viene versato su abiti, eliminarlo con acqua.
- E' necessario consultare preventivamente un medico nel caso in cui si stia assumendo una terapia farmacologia soggetta a prescrizione.
- Il GC Dry Mouth Gel può essere utilizzato insieme a GC Tooth Mousse / GC MI Paste o GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus ma non insieme ad altri prodotti.
- In rari casi il prodotto può causare sensibilizzazione in alcuni pazienti. Se si verificano simili reazioni, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale quali guanti, maschere facciali e occhiali di protezione.

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d'uso possono essere classificati come pericolosi secondo il GHS. Fate costante riferimento alle schede di sicurezza disponibili su:
http://www.gceurope.com
o per le Americhe
http://www.gcamerica.com
Possono anche essere richieste al fornitore.

PULIZIA E DISINFEZIONE
SISTEMI DI EROGAZIONE MULTIUSO: per evitare contaminazione crociata fra i pazienti, questo dispositivo richiede una disinfezione di medio livello. Immediatamente dopo l'uso ispezionare se il dispositivo e l'etichetta sono deteriorati. Gettare il dispositivo se danneggiato.
NON IMMERMERE. Pulire con cura il dispositivo per prevenire l'essicazione e l'accumulo di contaminanti. Disinfettare con un prodotto di presidio sanitario per il controllo dell'infezione di medio livello in conformità con le line guide regionali/nazionali.

Ultima revisione : 09/2018

GC Dry Mouth Gel

PARA PROPORCIONAR UN CONFORT EXTRA A LOS PACIENTES CON BOCA SECA

GC Dry Mouth Gel está diseñado para proporcionar confort a aquellas personas que sufren de boca seca. Se recomienda su uso en aquellas personas que tienen dificultades al comer, hablar, o sufren incomodidad debido a la sequedad en la boca. GC Dry Mouth Gel no contiene azúcar.

INDICACIONES

- Para proporcionar confort y alivio contra la sequedad de boca.
- Para proporcionar protección a los dientes y al tejido oral.
- Para ayudar a controlar el mal aliento.

CONTRAINDICACIONES

Evite el uso de este producto en pacientes con alergias conocidas a los hidroxibenzoatos.

INSTRUCCIONES DE USO

- Utilizar Dry Mouth Gel con tanta frecuencia como requiera la sensación de sequedad en la boca. Se puede aplicar cuantas veces sea necesario tanto de día como de noche.
- Extraer con el dedo o con un algodón la cantidad suficiente del gel. Aplicar el gel en la lengua, mucosa oral y / o dientes.

SABOR

Macedonia (F)*, Frambuesa (R), Naranja (O), Limón (L), Menta (M)
*No está disponible en Europa.

F, R, O, L y M en paréntesis son las abreviaturas de cada sabor. Estas abreviaturas se encuentran impresas en los tubos después del número de lote, con lo que se puede comprobar el sabor de cada tubo.
Por ejemplo, 060815MMenta

ALMACENAMIENTO

Recomendado para un rendimiento óptimo, almacenar en un lugar fresco oscuro y seco, alejado de la luz directa del sol (8-25°C)(46.4-77,0°F).

ENVASES

Un tubo contiene 40g (35mL).

- Paquete de 10 tubos (2 de cada uno de los 5 sabores)
- Paquete de 10 tubos (Pack 4 sabores)
- Paquete de 10 tubos (Frambuesa sabor)

Notas:
No en todos los países estarán disponibles todos los envases.

PRECAUCIÓN

- Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto enjuagar inmediatamente con agua abundante y solicitar atención médica.
- Poner siempre el tapón después de su uso y limpiar la pasta o humedad residual de alrededor del envase o dentro del tapón.
- En caso de caer sobre la ropa, lavar con agua.
- Si está tomando algún medicamento debe consultar a su médico antes de utilizar este producto.
- GC Dry Mouth Gel puede utilizarse en combinación con GC Tooth Mousse / GC MI Paste o GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus pero no debe ser usado con otros productos.
- En raras ocasiones el producto puede causar sensibilidad en algunas personas. Si se produce dicha reacción deje de aplicar el producto y diríjase a un médico.
- Siempre debe utilizarse un equipo de protección personal (PPE) como guantes, mascarillas y una protección adecuada de los ojos.

Algunos de los productos mencionados en las presentes instrucciones pueden clasificarse como peligrosos según GHS. Siempre familiarizarse con las hojas de datos de seguridad disponibles en:
http://www.gceurope.com
o para América
http://www.gcamerica.com
También se pueden obtener de su proveedor.

LIMPIEZA Y DESINFECTCIÓN
SISTEMA DE UTILIZACIÓN MULTI-USOS: para evitar la contaminación cruzada entre pacientes, este dispositivo requiere la desinfección de nivel medio. Inmediatamente después de su uso inspeccione el dispositivo compruebe si la etiqueta está dañada. Deseche el dispositivo si está dañado.
NO SUMERJA. Limpiar a fondo el dispositivo para prevenir el secado y la acumulación de contaminantes. Desinfectar con un producto de control de la infección de la salud de calidad registrada de nivel medio según las directrices regionales / nacionales.

Última revisión : 09/2018

GC Dry Mouth Gel

BIEDT MEER COMFORT BIJ MENSEN MET EEN DROGE MOND

GC Dry Mouth Gel is ontwikkeld voor personen die last hebben van een droge mond. Het gebruik ervan wordt aanbevolen voor mensen die moeilijkheden ondervinden bij het eten of praten of die last hebben van een droge mond. GC Dry Mouth Gel bevat geen suiker.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

- Voor comfort en verlichting bij een droge mond.
- Vormt een beschermlaag over tanden en mondweefsel.
- Voor beheersing van een slechte adem.

CONTRA-INDICATIES

Vermijd gebruik van dit product bij patiënten met een allergie voor hydroxybenzoaten.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Gebruik GC Dry Mouth Gel zo vaak als nodig is, wanneer de mond droog aanvoelt. Het kan op ieder gewenst moment van de dag of nacht worden gebruikt.
- Druk een toereikende hoeveelheid gel uit de tube op uw vinger of haal de gel uit de tube met een wattenstaafje. Breng de gel aan op de tong, de mondlijmvliezen en/of de tanden.

SMAKEN

Fruitmix (F)*, Framboos (R), Sinaasappel (O), Citroen (L), Mint (M)
*Niet leverbaar in Europa

De F, R, O, L en M tussen haakjes zijn de Engelse afkortingen van de verschillende smaken.

Deze afkortingen staan na het lotnummer op de tube om aan te geven welke smaak de tube bevat.

Zo is 060815M bijvoorbeeldMint

BEWAREN

Voor een optimaal resultaat, op een koele, donkere en droge plaats bewaren, buiten het bereik van direct zonlicht (8-25 °C)(46.4-77,0 °F).

VERPAKKING

Een tube bevat 40 g (35 mL).

- Verpakking met 10 tubes (2 stuks van iedere 4 smaken)
- Verpakking met 10 tubes (verpakking met 4 smaken)
- Verpakking met 10 tubes (Framboos smaak)

Opmerking:
Niet alle soorten verpakkingen zijn in ieder land beschikbaar.

LET OP

- Vermijd contact met de ogen. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies inwinnen.
- Breng na het gebruik altijd de dop aan en verwijder eventuele resten gel en vocht van de hals van de tube en uit de dop.
- Bij morsen op de kleding met water reinigen.
- Personen die geneesmiddelen op doktersvoorschriften gebruiken, moeten een arts raadplegen voordat dit product wordt gebruikt.
- GC Dry Mouth Gel kan worden gebruikt in combinatie met GC Tooth Mousse / GC MI Paste of GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus, maar mag niet in combinatie met andere producten worden gebruikt.
- Bij sommige personen kan dit product overgevoeligheid veroorzaken. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, mondmaskers en beschermbrillen.

Sommige producten waarnaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak u vertrouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op:
http://www.gceurope.com
of voor Amerika
http://www.gcamerica.com

Zij kunnen ook worden verkregen bij uw leverancier.

REINIGING EN DESINFECTIE
MULTI-TOEPASBARE DOSEERSYSTEMEN: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label gedesinfecteerd te worden. Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op beschadiging. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.
NIET ONDERDOMPELEN. Reinig het instrument grondig om het opdrogen en accumuleren van verontreinigingen te voorkomen. Desinfecteer met een medisch geregistreerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

Laatste herziening : 09/2018

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

IT

Antes de usar, lea detenidamente las instrucciones de uso.

ES

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.

NL

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug.

DA

GC Dry Mouth Gel

FOR AT ØGE VELVÆRET HOS MUNDTØRRE PATIENTER

GC Dry Mouth Gel er fremstillet for at øge velværet hos mundtørre personer. Vi anbefaler, at produktet anvendes af personer som har besvær ved at spise, tale eller som finder ubehag på grund af mundtørhed. Dry Mouth Gel indeholder ikke sukker.

ANBEFALEDE INDIKATIONER

- At øge velværet under mundtørre forhold.
- At opretholde et beskyttende lag på tænder og oralt væv.
- At minimere og kontrollere dålig ånde.

KONTRAINDIKATIONER

Dette produkt må ikke anvendes til patienter med kendt allergi mod hydroxybenzoates.

SÅDAN GØR MAN

- Anvend Dry Mouth Gel så ofte som muligt, når munden føles tør. Det kan være på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet.
- Tryk tilstrækkelig mængde gel ud af tuben på en finger eller en bonuldspættel. Applicer gelen på tunge, tandkød og/eller på tænder.

SMAGSVARIANTER

Frugtmix (F)*, Hindbær (R), Appelsin (O), Citron (L), Mint (M)
*Ikke tilgængelig i Europa.

F, R, O, L og M indeni parenteserne er forkortelser for de enkelte smagsvarianter.

Disse forkortelser er markerede på tuberne efter de s.k. lotnumre for at vise hvilken smag tuben indeholder.

Som eksempel, 060815M Mint

OPBEVARING

For optimal ydeevne anbefales, opbevares i en mørkt rum med lav luftfugtighed. Beskyt produktet imod direkte sollys (8-25°C)(46,4-77,0°F).

PAKNINGER

En tube indeholder 40 g (35 mL).

- Pakning med 10 tuber (2 af hver smag)
- Pakning med 10 tuber (4-Smags pakke)
- Pakning med 10 tuber (Hindbær smag)
 - Bemærk:

Alle pakninger vil ikke være tilgængelige i alle lande.

BEMÆRK:

- Undgå øjenkontakt. Såfremt det sker, skyl umiddelbart med rigeligt med vand og søg herefter lægehjælp.
- Sæt altid hæppen på efter brug og fjern også rester på tuben og den indvendige side af hæppen.
- Fjern evt. pletter fra tøj med vand.
- Hvis man indtager receptpligtig medicin, bør man rådfører sig med sin læge inden man begynder at anvende produktet.
- GC Dry Mouth Gel kan anvendes i kombination med GC Tooth Mousse / GC MI Paste eller GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus, men skal ikke anvendes sammen med andre produkter.
- I disse tilfælde kan produktet forårsage irritation hos visse personer. Hvis dette opleves, så afbrydes brug af produktet øjeblikkligt og lægehjælp opsøges.
- Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bæres.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht GHS. Læs altid op på alle arbejdschygiejniske anvisninger som kan findes på: http://www.gceurope.com eller for Amerika http://www.gcamerica.com De kan altid rekvireres hos dit depot.

RENGØRING OG DESINFEKTION
APPLICERINGSSYSTEM TIL FLERANGSBRUG: For at undgå krydstaminingering mellem patienterne, skal disse enheder desinfeceres på mellemniveau. Efter anvendelse inspiceres enheden umiddelbart for problemer. Defekt enhed skal kasseres.
MÅ IKKE LÆGGES I DESINFEKTIONSVÆSKER. Rengør enheden omhyggeligt og tør den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden. Desinficer produktet på mellemniveau og følg de nationale retningslinjer for dette.

Sidst revideret : 09/2018

GC Dry Mouth Gel

FÖR ATT ÖKA VÄLBEFINNANDET HOS MUNTORRA PATIENTER

GC Dry Mouth Gel är framtaget för att öka välbefinnandet hos muntorra personer. Vi rekommenderar att produkten används av personer som har svårigheter att äta, tala eller som känner obehag pågrund av muntorrhet. GC Dry Mouth Gel är sockerfri.

REKOMMENDERADE INDIKATIONER

- Att öka välbefinnandet under muntorra förhållanden.
- Att tillhandahålla ett skyddande skikt på tänder och oral vävnad.
- Att minimera och kontrollera dålig andedräkt.

KONTRAINDIKATIONER

Undvik att använda denna produkt på patienter med kanda allergier patienter för hydroxybenzoater.

SÅ HÅR GÖR MAN

- Använd GC Dry Mouth Gel så ofta som munnen känns torr. Det kan vara närsomhelst under dygnet.
- Tryck ut tillräcklig mängd gel från tuben på ett finger eller på en bomullspinne. Applicera gelen på tungan, tandkötet och/eller på tänderna.

SMAKER

Fruktallad (F)*, Hallon (R), Apelsin (O), Citron (L), Mint (M)
*Inte tillgänglig i Europa.

F, R, O, L och M inom parentesen är förkortningar för varje smak. Dessa förkortningar är markerade på tuberna efter de s.k. lotnumren för att visa vilken smak tuben innehåller.

Som exempel, 060815M Mint

FÖRVARING

For optimala resultat rekommenderas, förvaras i ett mörkt utrymme med låg fuktighet. Skydda produkten från direkt solljus (8-25°C)(46,4-77,0°F).

FÖRPACKNINGR

En tub innehåller 40g (35mL).

- Förpackning med 10 tuber (2 av varje smak)
- Förpackning med 10 tuber (4-smaksfp)
- Förpackning med 10 tuber (Hallon smak)
 - Note:

De förpackningar som nämns är möjligtvis inte tillgängliga i alla länder.

VARNING

- Unvik ögonkontakt. Om så sker skölj omedelbart med vatten och sök läkarhjälp.
- Sätt alltid på korken efter användning och avlägsna spill och fukt på tuben och på insidan av korken.
- Avlägsna eventuellt spill på kläder med vatten.
- Om man intar receptbelagda mediciner bör läkare rådfrågas innan man börjar använda produkten.
- GC Dry Mouth Gel kan användas i kombination med GC Tooth Mousse / GC MI Paste eller GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus men ska inte användas tillsammans med andra produkter.
- I sällsynta fall kan produkten orsaka irritation hos vissa personer. Om detta upplevs, avbryt användningen av produkten och remitera till läkare.
- Använd alltid handskar, munsydd och skyddsglasögon eller annan personlig skyddsutrustning.

Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på; http://www.gceurope.com eller för Amerika på http://www.gcamerica.com Dessa kan också erhållas från din leverantör.

RENGÖRING OCH DESINFEKTION
APPLICERINGSSYSTEM FÖR FLERGÅNGSBRUK: för att undvika korskontaminering mellan patienter så fodrar dessa enheter desinfektion på mellannivå. Efter användning, inspektera omedelbart enheten samt kvalitetsförssäring av etiketten. Infall skador kan ses, byt ut enheten.
SÅNK INTE NER I DESINFEKTIONSVÅTSKA. Rengör enheten noggrant och torka den ordentligt torr. Tillse att ingen ackumulerad smuts finns kvar. Desinficera med en produkt som är klassad og registrerad i enlighet med regional/nationella riktlinjer gällande infektionskontroll på mellannivå.

Reviderad senast : 09/2018

GC Dry Mouth Gel

CONFORTO ADICIONAL PARA QUEM SOFRE DE BOCA SECA

O GC Dry Mouth Gel foi concebido para proporcionar conforto a quem sofre de síndrome de Boca Seca ou Xerostomia. Recomenda-se sua utilização por pessoas que sintam dificuldade ao comer e falar ou que sintam desconforto devido a boca seca. O GC Dry Mouth Gel não contém açúcar.

INDICAÇÕES RECOMENDADAS

- Proporcionar conforto e alívio da boca seca.
- Formar um revestimento protector dos dentes e tecido oral.
- Ajuda a controlar o mau hálito.

CONTRA-INDICAÇÕES

Evitar o uso deste produto em pacientes com alergias conhecidas a hidroxibenzoatos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Utilize o GC Dry Mouth Gel sempre que necessário, quando sentir a boca seca. Pode utilizar a qualquer hora do dia ou da noite.
- Esprema uma quantidade de gel suficiente do tubo sobre o dedo ou utilize um cotonete de algodão para retirar o gel do tubo. Aplique o gel sobre a língua, mucosa oral e/ou dentes.

SABOR

Salada de Fruta (F)*, Framboesa (R), Laranja (O), Limão (L), Menta (M)
*Não disponível na Europa.

As letras F, R, O, L e M entre parêntesis dão a indicação de cada sabor. Estas letras estão marcadas nos tubos no seguimento de uma série de números, indicando o sabor do conteúdo. Por exemplo, 060815M Menta

ARMAZENAMENTO

Recomenda-se, para um ótimo desempenho, conserve em local fresco, escuro e pouco húmido, protegido da luz do sol directa (8-25°C)(46,4-77,0°F).

EMBALAGEM

Tubo com 40g (35mL).

- Embalagem de 10 tubos (2 de cada um dos 5 sabores)
- Embalagem de 10 tubos (4 Sabores Pack)
- Embalagem de 10 tubos (Framboesa sabor)
 - Note:

Em alguns paises algumas embalagens não estarão disponíveis.

CUIDADO

- Evitar o contacto com os olhos. Em caso de contacto, lave imediatamente com água abundante e consulte o médico.
- Reponha sempre a tampa depois de usar e remova resíduos de pasta ou de humidade em volta do bocal do tubo ou do interior da tampa.
- Se derramar sobre o vestuário, lave com água.
- Se estiver a tomar medicamentos prescritos pelo médico, consulte um médico antes de utilizar este produto.
- O GC Dry Mouth Gel pode ser utilizado em combinação com os cremes GC Tooth Mousse / GC MI Paste ou GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus, mas não deve ser utilizado com outros produtos.
- Em casos raros, o produto pode provocar reacções de sensibilidade em algumas pessoas. Caso se observem reacções desse género interrompa o uso do produto e consulte um médico.
- Equipamentos de protecção individual (EPI) tais como luvas, máscaras e óculos de segurança devem ser sempre utilizados.

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre familiarize-se com as fichas de informação de segurança disponíveis em: http://www.gceurope.com ou para as Américas http://www.gcamerica.com Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

LIMPEZA E DESINFEÇÃO
SISTEMAS DE ENTREGA DE MULTIUSOS: para evitar a contaminação cruzada entre pacientes, este dispositivo requer desinfecção de nível médio. Imediatamente após a utilização inspecionar o dispositivo e rótulo para verificar se há deterioração. Descartar o dispositivo danificado.
NÃO MERGULHAR. Limpar cuidadosamente o dispositivo para evitar a secagem e acumulação de contaminantes. Desinfetar com um produto certificado para o controle da infecção de nível médio, de acordo com as diretrizes regionais/nacionais.

Última revisão : 09/2018

GC Dry Mouth Gel

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ

Το ζελέ GC Dry Mouth Gel σχεδιάστηκε για την απόδοση άνεσης στα άτομα με ξηροστομία. Η χρήση του συστήνεται στα άτομα που συναντούν δυσκολίες στη μύσηση, την ομιλία ή τακτιπρωρούνται λόγω ξηροστομίας. Το ζελέ GC Dry Mouth Gel δεν περιέχει ζάχαρη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Η απόδοση άνεσης και ανακούφισης σε περιπτώσεις ξηροστομίας.
- Η δημιουργία προστατευτικού επιστρώματος στα δόντια και τους μαλθακούς ιστούς.
- Ο έλεγχος της άσχημης αναπνοής.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε ασθενείς με γνωστή αλλεργία στα υδρόξυ-βενζοϊκά παράγωγα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Χρησιμοποιήστε το ζελέ GC Dry Mouth Gel όσο συχνά απαιτείται όταν το στόμα είναι ξηρό. Αυτό μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας.
- Εξωθείστε ικανοποιητική ποσότητα ζελέ από το σωληνάριο στο δάχτυλο σας ή σε μία πιπέτα. Τοποθετήστε το ζελέ στη γλώσσα, το βλεφρόγonio του στόματος και/ή τα δόντια.

ΓΕΥΣΗ

Φρούτα (F)*, Βατόμουρο (R), Πορτοκάλι (O), Λεμόνι (L), Μέντα (M)
*Δεν διατίθεται στην Ευρώπη.

Τα F, R, O, L και M στις παρενθέσεις είναι συντομώσεις για κάθε γεύση. Οι συντομώσεις σημειώνονται και πάνω στα σωληνάρια μετά τον αριθμό παραγωγής για την επισήμανση της γεύσης του περιεχομένου. Για παράδειγμα, 060815M Μέντα

ΦΥΛΑΞΗ

Για ιδανική απόδοση συστήνεται η, το υλικό πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερή περιοχή χαμηλής υγρασίας μακριά από την άμεση επαφή με το ηλιακό φως (8-25°C)(46,4-77,0°F).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Ένα σωληνάριο περιέχει 40g (35mL).
- Συσκευασία 10 σωληναρίων (2 από κάθε μία από τις 5 γεύσεις)
- Συσκευασία 10 σωληναρίων (Συσκευασία 4 γεύσεων)
 - Σημείωση:

Κάποιοι συσκευασίες δεν διανέμονται σε όλες τις χώρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αποφύγετε την επαφή του υλικού με τους οφθαλμούς. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Επανατοποθετήστε το καπάκι στη θέση του αμέσως μετά τη χρήση και απομακρύνετε κάθε περίσσεια πύστας ή υγρασίας γύρω από το λαίμω το σωληναρίου ή μέσα από το καπάκι.
- Αν το υλικό πταχτεί στα ρούχα ξεπλύνετε με νερό.
- Άτομα που λαβίνουν φαρμακευτική αγωγή πρέπει να συμβουλευτούν ειδικό πριν από τη χρήση του προϊόντος αυτού.
- Το ζελέ GC Dry Mouth Gel μπορεί να συνδυαστεί με το προϊόν GC Tooth Mousse / GC MI Paste ή GC Tooth Mouss Plus / GC MI Paste Plus αλλά όχι με άλλα προϊόντα.
- Σε σπάνιες περιπτώσεις, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει υπερευαισθησία σε κάποια άτομα. Αν παρατηρηθούν τέτοιες αντιδράσεις σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Ο προσωπικός εξοπλισμός ασφαλείας (ΠΕΑ) όπως γάντια, μάσκα και προστατευτικά γυαλιά πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται.

Κάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης μπορεί να ταξινομηθούν ως επικίνδυνα σύμφωνα με το GHS. Εξοικειωθείτε με τις οδηγίες ασφαλείας που διατίθενται στη διεύθυνση: http://www.gceurope.com ή για την Αμερική http://www.gcamerica.com Επίσης μπορείτε να τις παραλάβετε από τον προμηθευτή σας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: για την αποφυγή διασταυρωμένης επιμόλυνσης μεταξύ των ασθενών η συσκευή αυτή απαιτεί μέτριο βαθμού αποστείρωση. Αμέσως μετά τη χρήση επιθεωρήστε τη συσκευή και την επικέτα της για πιθανή μετάπτωση της κατάστασής της. Απορρίψτε τη συσκευή αν έχει καταστραφεί. ΜΗΝ ΕΜΒΑΠΤΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Καθαρίστε σχολαστικά τη συσκευή προς αποφυγή ξήρανσης και συσσώρευσης μολυσματικών στοιχείων. Αποστειρώστε με ένα μέτριο βαθμού εγκεκριμένο αντισηπτικό προϊόν ιατρικής χρήσης σύμφωνα με τις τοπικές/εθνικές Οδηγίες.

Τελευταία αναθεώρηση κειμένου : 09/2018

GC Dry Mouth Gel

FOR ØKT VELBEHAG HOS MUNNTØRRE PASIENTER

GC Dry Mouth Gel hjelper personer med munntørret til en bedre hverdag. GC Dry Mouth Gel bør benyttes av personer som har problemer med å spise og snakke, og av personer som kjenner generelt ubehag på grunn av munntørret. GC Dry Mouth Gel inneholder ikke sukker.

ANBEFALTE INDIKASJONER

- Økt velbehag under munntørre forhold.
- Danne et beskyttende lag på tenner og oralt vev.
- Kontrollere og minimere dårlig ånde.

KONTRAINDIKASJONER

Unngå å bruke dette produktet på pasienter med kjent allergi mot hydroxybenzoater.

SLIK GÅR DU FREM

- Bruk GC Dry Mouth Gel i de tilfeller der munnen kjennes tørt, uansett tid på døgnet.
- Trykk ut en tilstrekkelig mengde fra tuben på en finger eller en Q-tips. Plasser gelen på tungen, tannkjøttet og/eller tennene.

SMAKER

Fruktsalat (F)*, Bringebær (R), Appelsin (O), Sitron (L), Mint (M)
*Ikke tilgjengelig i Europa.

F, R, O, L og M er forkortninger for de ulike smakene. De er avmerket på tuben - etter lotnummeret, for å vise hvilken smak tuben inneholder. Som for eks.: 060815M, med mint smak.

OPPBEVARING

For optimal ytelse anbefales, oppbevares i et mørkt område med lav fuktighet, beskyttet mot direkte sollys (8-25°C).

FORPAKNING

En tube innholder 40g (35mL).

- Pakke med 10 tuber (2 av hver smak)
- Pakke med 10 tuber (4-Flavour Pakke)
- Pakke med 10 tuber (Bringebær smak)
 - Mer:

Ikke alle forpakninger vil være tilgjengelig i alle land.

VARSOHMET

- Unngå øyekontakt. Om så skjer, skyll rikelig med vann og kontakt lege.
- Skru alltid på en ren og restfri kork. Fjern søl og rester fra tuben.
- Fjern evt. søl på tekstiler med vann.
- Bruker du reseptbelagte medisiner bør lege konsulteres før bruk av produktet.
- GC Dry Mouth Gel kan brukes i kombinasjon med GC Tooth Mousse / GC MI Paste eller GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus, men skal ikke brukes sammen med andre produkter.
- I enkelte tilfeller kan produktet forårsake irritasjon. Om så skjer, avbryt behandlingen og ta kontakt med lege.
- Bruk vernehansker, ansiktsbeskyttelse, vernebriller eller andre personlige beskyttelsesanordninger.

Noen av produkter some r referert tilI denne IFU kan være klassifisert som skadelige I hht GHS. Gjør deg alltid kjent med sikkerhetsdatabladet som er tilgjengelige på: http://www.gceurope.com or for det amerikanske kontinent http://www.gamerica.com Sikkerhetsdatablad er også tilgjengelige hos din leverandør.

RENGJØRING OG DESINFEKSJON

APPLISERINGSSYSTEM SOM ER BEREGNET TIL FLERANGSBRUK: For å unngå kryssinfeksjon mellom pasienter skal skal alle enheter som inngår i denne pakken desinfiseres på Midtels nivå. Straks etter desinfeksjon skal enhetene manuelt inspiseres for å se om de er forringet. Hvis skadet, kastes enheten.
SKAL IKKE SENKES NED I DESINFEKSJONSVÆSKE: Bare gjør enheten grundrig ren for å forebygge uttarring og forurensning. Desinfiser med et middels nivå smittevernprodukt iht. Nasjonale retningslinjer

Sist revidert: 09/2018

GC Dry Mouth Gel

MUKAVUUTTA KUIVASTA SUUSTA KÄRSIVILLE

GC Dry Mouth Gel on kehitetty luomaan mukavuutta kuivasta suusta kärsiville potilaille. Sitä suositellaan käytettäväksi ihmisille joilla voi olla ongelmia syödessä, puhuessa ja joille kuiva suu tuntuu epämiellyttävältä. GC Dry Mouth Gel on sokeriton.

KÄYTTÖINDIKAATIOT

- Luo mukavuutta ja helpotusta kuivaisuille potilaille.
- Muodostaa suojaavan kerroksen hampaalle ja ienkudokselle.
- Helpottaa hengitystä.

KONTRAINDIKAATIOT

Vältä tuotteen käyttöä potilaille, joiden tiedetään olevan allergisia hydroksibenzoateille.

KÄYTTÖOHJEET

- GC Dry Mouth Gel:iä voidaan käyttää aina kuin suu tuntuu kuivalta. Sitä voidaan käyttää sekä yöllä että päivällä.
- Ota sopiva määrä geeliä sormenpäälle suoraan tuubista tai käytä esim. vanupuikkoa. Vie geeli kielelle, limakalvolle ja/tai hampaille.

MAUT

Fruit Salad (F)*, Eurooperry (R), Orange (O), Lemon (L), Mint (M)
*Ei saatavilla Ruossassa

F, R, O, L, M, kirjaimet suluissa ovat eri makujen lyhenteitä. Nämä lyhenheet on merkitty tuubeihin Lot numeron jälkeen osoittamaan tuubin sisältöä.

Esimerkiksi, 060815M Mint

SÄILYTYS

Käyttövaramuuden takaamiseksi suosittelemme, säilytä viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa suojattuna suoralta auringonvalolta (8-25°C)(46,4-77,0°F).

PAKKAUKSET

Tuubi sisältää 40g (35mL).

- 10 tuubin pakkaus (2 jokaista 5 eri makua)
- 10 tuubin pakkaus (4 maun pakkaus)
- 10 tuubin pakkaus (Raspberry maku)
 - Huomaar:

Kaikkia pakkauksia ei ole saatavilla kaikissa maissa.

VAROITUS

- Varo geelin joutumista silmiin. Kontaktin tapahtuessa, huuhtele välittömästi runsaalla määrällä vettä ja hakeudu lääkäriin hoitoon.
- Sulje korkki aina käytön jälkeen ja poista geeliylimäärät korkin sisältä ja tuubin reunoilta.
- Jos geeliä roiskuu vaatteille pese ne vedellä.
- Reseptilääkkeiden käyttäjien tulee ottaa yhteyttä lääkäriin ennen kuin aloittaa tämän tuotteen käytön.
- GC Dry Mouth Gel:iä voidaan käyttää yhdessä GC Tooth Mousse / GC MI Paste Plus:n ja GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus:an kanssa mutta ei pitäisi käyttää muita vastaavia tuotteita.
- Joissakin harvinaisissa tapauksissa tuote saattaa aiheuttaa herkkyyttä jollekin ihmisille. Tällaisissa tapauksissa lopeta tuotteen käyttö ja pyydä potilasta ottamaan yhteyttä lääkäriin.
- Käytä aina henkilökohtaista suojavarustusta, kuten suojahansikkaita, kasvosuojaa ja suojalaseja.

Jotkin tässä käyttöohjeessa mainitut tuotteet saatetaan GHS-järjestelmässä luokitella vaarallisiksi. Tutustu aina käyttöturvallisuustiedotteisiin osoitteessa: http://www.gceurope.com tai Amerikassa http://www.gcamerica.com

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla myös jälleenmyyjiltä.

PUHDISTAMINEN JA DESIFIOINTI
UUDELEENKÄYTTETTÄVÄ ANNOTSELUJÄRJESTELMÄT: Välineet on desinfioitava keskitason vaatimuksina noudattaen, jotta vältytään ristikontaminaatiolta potilaiden välillä. Tarkista välineet ja etiketit vaurioiden varalta heti käytön jälkeen. Vahingoittuneet välineet on hävitettävä.
ÄLÄ UPOTA. Puhdista välineet huolellisesti ehkäistäksesi kuivumista ja kontaminaation aiheuttajien kertymistä välineisiin. Desinfioi terveydenhuollon tarpeisiin rekisteröidyn ja keskitason vaatimukset täyttävän infektiota torjuvan tuotteen avulla paikallisten/kansallisten ohjeiden mukaisesti.

Viiimeisin tarkistus : 09/2018

FI